


DuoLock®

Curved Tail Closure / Cierre de cola curva / Attache courbe

Instructions for use
Instrucciones para el uso
Mode d'emploi

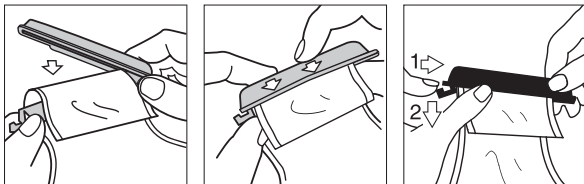

Read instructions for use.

For use with ConvaTec drainable pouches.

INSTRUCTIONS

TO CLOSE:

Lay the curved blade on top of the pouch tail with the curve toward the body. Fold up the tail **only once** then place the blade into the hollow clip. Ensure there are no wrinkles in the pouch near the fold.

Press firmly on raised bar of tail closure until it locks securely into place.

TO OPEN:

Press the v-shaped tab as illustrated. Gently slide the curved blade of the closure up and away from the hollow outer clip.

For more information on ConvaTec products, contact us at the address below.

Manufactured for:



ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

Canada
Legal Manufacturer / Fabricant légal
ConvaTec Inc.
7815 National Service Road, Suite 600
Greensboro, NC 27409 USA
1-800-422-8811

www.convatec.com

© 2023 ConvaTec Inc.

®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.



Lea las instrucciones para el uso.

Para usar con bolsas drenables ConvaTec.

INSTRUCCIONES

PARA CERRAR:

Apoye la cuchilla curva sobre la parte superior de la cola de la bolsa, con la curva hacia el cuerpo. Pliegue la cola **solamente una vez** y luego coloque la cuchilla dentro de la pinza hueca. Verifique que no haya arrugas en la bolsa cerca del pliegue.

Haga presión firme sobre la barra levantada del cierre de cola hasta que se trabé con seguridad en su lugar.

PARA ABRIR:

Haga presión sobre la oreja en forma de v, como se indica en la ilustración. Deslice con cuidado la cuchilla curva del cierre hacia arriba y retirándola de la pinza exterior hueca.

Para obtener más información sobre los productos ConvaTec, póngase en contacto con nosotros a la dirección al pie.

®/™ indica una marca registrada de ConvaTec Inc.

Distribuido por:

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811



Veuillez lire le mode d'emploi.

Utilisez avec les sacs vidables de ConvaTec.

MODE D'EMPLOI

FIXATION DE L'ATTACHE :

Placez la tige courbe de l'attache sur l'extrémité du sac, la partie courbe du côté du corps. Pliez l'extrémité du sac une seule fois, puis fermez l'attache. Assurez-vous que le sac est bien lisse près du pli.

Exercez une pression ferme sur l'attache jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

OUVERTURE DE L'ATTACHE :

Exercez une pression sur l'onglet en forme de v (voir l'illustration). Glissez doucement la tige courbe de l'attache vers le haut pour la séparer de la partie fixe.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits de ConvaTec, veuillez nous écrire à l'adresse ci-dessous.

®/™ Marque déposée de ConvaTec Inc.

Revised 2023-06
1024936G3