


- Applying the Skin Barrier (Figure 2)
- Remove release liner from the skin barrier.
- Center the opening of the skin barrier over the stoma.
- Apply the skin barrier against the skin around the stoma for 30 seconds.
- Remove or remaining release liner from the adhesive.
- Smooth in place and remove wrinkles.
- Wear as instructed and avoid secure.Wear time may vary.

4. Applying the Pouch
  - Separate the pouch flaps to allow air to enter. (Figure 3)
  - Hold the Accordion Flange™ and the pouch flange. (Figure 4)
  - Line up the Accordion Flange™ and the pouch flange. (Figure 4)
  - Starting at the bottom, apply gentle pressure around the circumference of the flange until they "snap" in place and feel secure.
  - Try to tug the pouch to ensure a secure connection. (Figure 5)

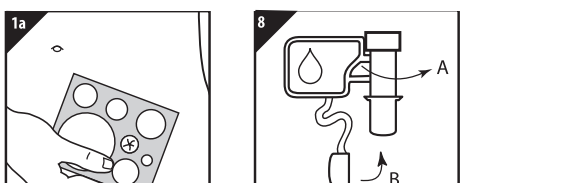

5. Emptying the Pouch
  - Drainable Pouches with InvisiClose™ "Tall Closure" (Figure 1)
  - Field the tall closure beginning with the outlet end strip until the interlocking closures overlap. Press the interlocking closures together across the full length and zipper until you feel them close. If desired, turn the pocket inside-out to conceal the tall closure. (Pocket is available on Natura™ pouches only.)
  - Drainable Pouches with Tall Closure (Figure 7)
  - Drainable Pouches with Accordion Flange™ (Figure 8)
  - Drainable Pouches with Fold over Top (Figure 9)
  - Drainable Pouches with Soft Top (Figure 10)

6. Emptying the Pouch
  - Drainable Pouches with InvisiClose™ "Tall Closure" (Figure 11)
  - Unlock the pouch closure and flip up by pushing in both ends of the outlet end strip with fingers. (Figure 12)
  - Drainable Pouches with Tall Closure (Figure 12)
  - Drainable Pouches with Accordion Flange™ (Figure 13)
  - Drainable Pouches with Fold over Top (Figure 14)
  - Drainable Pouches with Soft Top (Figure 14)

7. Connection to Night Drainage System
  - Accusafe™ with Soft Top (Figure 16)
  - Soft Top (Figure 17)

8. Information about Pouches with Filters
  - Cover the filter with the sticker provided when bathing, swimming, etc.
  - Remove after water contact.

9. Removing the Pouch (Figure 19)

10. Removal of the Skin Barrier (Figure 19)

11. Disposal
 

This device is for single-use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination. Physical properties of the device may no longer be optimized for intended use.

12. Disposal
 

If during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or your national authority.

After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local laws and regulations.

13. Disposal
 

© 2022 Convatec Inc.  
 \*Indicates trademarks of Convatec Inc.

14. Disposal
 

© DEUTSCH

15. Disposal
 

Zweifelles Stomaerorgungs-System mit Akkordeon-Rastring

16. Disposal
 

PRODOTTO SCRIVENDO

17. Disposal
 

Die Natura™-Beutelsystem mit Akkordeon-Rastring ermöglichen es, mit dem Finger vollständig unter den Rastring zu greifen, während der Rest mit dem größten Rastring des Beutels verbunden wird. Diese Beutelsysteme müssen mit dem Rastring verbunden sein, um die Verbindung zu gewährleisten. Die Natura™-Beutelsysteme sind mit dem Rastring verbunden und können separat verwendet werden.

18. Disposal
 

Wichtig: Dieses Hilfsmittel ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und sollte nicht wiederverwendet werden. Eine erneute Verwendung könnte zu einem erhöhten Infektionsrisiko und Kreuzkontamination führen. Die physikalischen Eigenschaften des Produkts sind nach dem ersten Gebrauch nicht mehr optimal für den Verwendungszweck geeignet.

19. Disposal
 

Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden.

20. Disposal
 

© 2022 Convatec Inc.  
 \*Andrzejewski Watercare/Convatec Inc.

21. Disposal
 

© ITALIANO

22. Disposal
 

Systema per stomia a due pezzi - Flangia a soffietto

23. Disposal
 

ISTRUZIONI PER L'USO

24. Disposal
 

DESCRIZIONE PRODOTTO

25. Disposal
 

Uso previsto: Gestione delle emissioni dallo stoma.

26. Disposal
 

Indicazioni per l'uso: Per uso con colostomia, ileostomia o urostomia.

27. Disposal
 

Nota: È disponibile nella versione in Stomahesive™ e Durahesive™.

28. Disposal
 

PRECAUZIONI E OSSERVAZIONI

29. Disposal
 

ATTENZIONE: È importante prestare la massima attenzione quando si prepara il prodotto adesivo intorno ad una urostomia non sporgente, specialmente quando si applica il prodotto adesivo intorno a un reservoir urinario. In alcuni casi, è stata riscontrata la presenza di sostanze adesive nel sistema di raccolta urinaria. Evitare di usare il prodotto adesivo intorno a una urostomia non sporgente e continuare ad utilizzare il prodotto adesivo ed iniziare un adeguato trattamento causale infettivo o contaminazione cronica. Il dispositivo potrebbe non aderire con la stessa efficacia di un prodotto non sporgente.

30. Disposal
 

ATTENZIONE: Prima di utilizzare una barriera cutanea, consultare un operatore sanitario per verificare l'efficacia necessaria.

31. Disposal
 

ATTENZIONE: Cercate di evitare di portare la cute per pazienti che usano pannolini. In caso di irritazione, consultare un operatore sanitario.

32. Disposal
 

ATTENZIONE: Proteggere lo stoma da traumi o lesioni.

33. Disposal
 

ISTRUZIONI PER L'USO

34. Disposal
 

1. Preparazione della pelle

35. Disposal
 

2. Preparazione della barriera cutanea

36. Disposal
 

3. Applicazione della flangia

37. Disposal
 

4. Applicazione della flangia

38. Disposal
 

5. Chiusura della sacca

39. Disposal
 

6. Applicazione della flangia

40. Disposal
 

7. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

41. Disposal
 

8. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

42. Disposal
 

9. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

43. Disposal
 

10. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

44. Disposal
 

11. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

45. Disposal
 

12. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

46. Disposal
 

13. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

47. Disposal
 

14. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

48. Disposal
 

15. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

49. Disposal
 

16. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

50. Disposal
 

17. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

51. Disposal
 

18. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

52. Disposal
 

19. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

53. Disposal
 

20. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

54. Disposal
 

21. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

55. Disposal
 

22. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

56. Disposal
 

23. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

57. Disposal
 

24. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

58. Disposal
 

25. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

59. Disposal
 

26. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

60. Disposal
 

27. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

61. Disposal
 

28. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

62. Disposal
 

29. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

63. Disposal
 

30. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

64. Disposal
 

31. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

65. Disposal
 

32. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

66. Disposal
 

33. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

67. Disposal
 

34. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

68. Disposal
 

35. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

69. Disposal
 

36. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

70. Disposal
 

37. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

71. Disposal
 

38. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

72. Disposal
 

39. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

73. Disposal
 

40. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

74. Disposal
 

41. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

75. Disposal
 

42. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

76. Disposal
 

43. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

77. Disposal
 

44. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

78. Disposal
 

45. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

79. Disposal
 

46. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

80. Disposal
 

47. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

81. Disposal
 

48. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

82. Disposal
 

49. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

83. Disposal
 

50. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

84. Disposal
 

51. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

85. Disposal
 

52. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

86. Disposal
 

53. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

87. Disposal
 

54. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

88. Disposal
 

55. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

89. Disposal
 

56. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

90. Disposal
 

57. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

91. Disposal
 

58. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

92. Disposal
 

59. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

93. Disposal
 

60. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

94. Disposal
 

61. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

95. Disposal
 

62. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

96. Disposal
 

63. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

97. Disposal
 

64. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

98. Disposal
 

65. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

99. Disposal
 

66. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

100. Disposal
 

67. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

101. Disposal
 

68. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

102. Disposal
 

69. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

103. Disposal
 

70. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

104. Disposal
 

71. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

105. Disposal
 

72. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

106. Disposal
 

73. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

107. Disposal
 

74. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

108. Disposal
 

75. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

109. Disposal
 

76. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

110. Disposal
 

77. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

111. Disposal
 

78. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

112. Disposal
 

79. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

113. Disposal
 

80. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

114. Disposal
 

81. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

115. Disposal
 

82. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

116. Disposal
 

83. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

117. Disposal
 

84. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

118. Disposal
 

85. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

119. Disposal
 

86. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

120. Disposal
 

87. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

121. Disposal
 

88. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

122. Disposal
 

89. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

123. Disposal
 

90. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

124. Disposal
 

91. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

125. Disposal
 

92. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

126. Disposal
 

93. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

127. Disposal
 

94. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

128. Disposal
 

95. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

129. Disposal
 

96. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

130. Disposal
 

97. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

131. Disposal
 

98. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

132. Disposal
 

99. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

133. Disposal
 

100. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

134. Disposal
 

101. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

135. Disposal
 

102. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

136. Disposal
 

103. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

137. Disposal
 

104. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

138. Disposal
 

105. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

139. Disposal
 

106. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

140. Disposal
 

107. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

141. Disposal
 

108. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

142. Disposal
 

109. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

143. Disposal
 

110. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

144. Disposal
 

111. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

145. Disposal
 

112. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

146. Disposal
 

113. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

147. Disposal
 

114. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

148. Disposal
 

115. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

149. Disposal
 

116. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)

150. Disposal
 

117. Rimozione della barriera cutanea (Figure 19)



