



Surgicare

Urihesive™ strips


15 strips 120mm x 15mm

(en) to aid the management of urinary incontinence

Urihesive™ strips are prepared from non-sensitising ingredients including gelatin, pectin, sodium carboxymethylcellulose and polyisobutylene.

Urihesive™ strips make the management of urinary incontinence in men (using condom type devices) more acceptable by providing comfortable leak free adhesion of the condom to the penis avoiding the risk of irritation and soreness often associated with other types of adhesive.

Applying the Urihesive™ strip


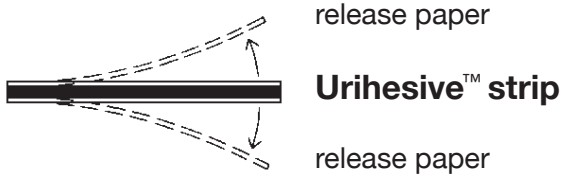


release paper

Urihesive™ strip

release paper

1. Remove the hair at the base of the penis if necessary.
2. Cut the **Urihesive™ strip** to a length which will just meet when wrapped around the penis.
3. Expose the adhesive surface on **one** side of the **Urihesive™ strip** by removing the release paper and apply the **Urihesive™ strip** around the penis **(A)**. Firm adhesion is ensured if the strip is held in place for about 15 seconds.

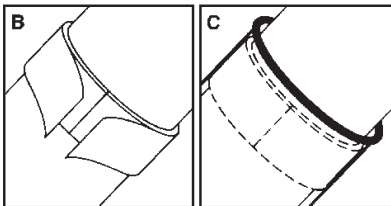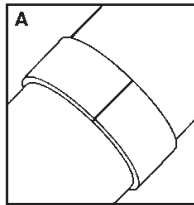

Surgicare

Urihesive™ strips


15 strips 120mm x 15mm

(nl) Hulpmiddel bij de behandeling van urinaire incontinentie

Urihesive™ strips zijn gemaakt van niet irriterende ingrediënten waaronder gelatine, pectine, sodium carboxymethyl cellulose en polyisobuthyleen.

Urihesive™ strips maken de behandeling van urinaire incontinentie systemen bij mannen (condoomachtige systemen) acceptabeler. Een comfortabele lekvrije hechting van het condoom aan de penis helpt de kans op irritaties en pijnlijkheden voorkomen.

Gebruik van de Urihesive™ strip


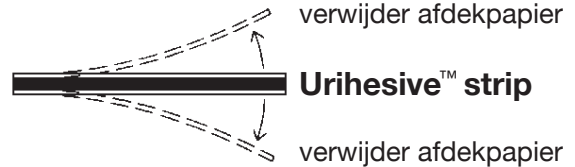


verwijder afdekpapier

Urihesive™ strip

verwijder afdekpapier

1. Verwijder zonodig het haar rondom de penis.
2. Knip de **Urihesive™ strip** af op de lengte waarop deze precies om de penis past.
3. Verwijder het afdekpapier aan één kant van de **Urihesive™ strip** zodat het plakgedeelte vrijkomt. Plak de **Urihesive™ strip** om de penis **(A)**. Houd de strip 15 seconden goed op zijn plaats.

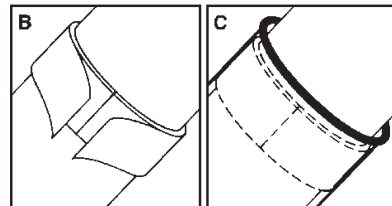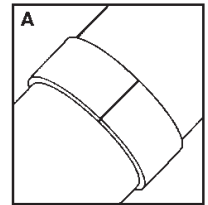

4. Remove the release paper from the outer surface of the **Urihese™ strip (B)**.
5. **Remove any traces of talc or other protection from the inside of the condom.**
6. Roll on the urine collecting device so that the collar comes behind the **Urihese™ strip** and squeeze onto the **Urihese™** surface to ensure a secure seal **(C)**. It is important that the collecting device is of suitable diameter and length so that creasing on top of the **Urihese™ strip** does not occur and that twisting of the device below the end of the penis is avoided.
7. The **Urihese™ strip** should be replaced each day when the condom is changed.
8. Any residue of the **Urihese™** remaining on the skin after removing the strip may be cleaned away with soap and water.

This device is for single-use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination. Physical properties of the device may no longer be optimal for intended use.

If during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local laws and regulations.

 Medical Device  Importer  Authorized representative in the European Community


Order No. S120



For further information on the complete **ConvaTec Product Range** please contact

Manufactured by:

ConvaTec Inc.

Greensboro, NC 27409

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK


United Kingdom
0800 282 254 - Ostomy Care
0800 289 738 - Wound Therapeutics

Ireland 1 800 721721
Israel + 972 3 9256712




© 2021 ConvaTec Inc.
®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.

4. Verwijder vervolgens het afdekpapier aan de buitenkant van de strip **(B)**.
5. **Zorg dat het condoom aan de binnenkant goed schoon is en verwijder eventueel sporen van talk.**
6. Rol het urine opvangsysteem om de penis, tot de rand achter de **Urihese™ strip** komt. Druk het stevig op de **Urihese™ strip** voor een goede hechting **(C)**. Het is belangrijk dat het opvangmateriaal de juiste diameter heeft zodat kreuken en plooiën op de **Urihese™ strip** niet voorkomen en dat verwringen om de penis wordt vermeden.
7. De **Urihese™ strip** moet elke dag worden vervangen wanneer ook het condoom wordt verwisseld.
8. Elk overblijfsel van de **Urihese™ strip** dat op de huid achterblijft na het verwijderen van de strip kan worden gewassen met water en zeep.

Dit hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik en mag niet opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan een verhoogd risico op infectie of kruisbesmetting met zich meebrengen. Mogelijk zijn de fysieke eigenschappen van het hulpmiddel niet meer optimaal voor het beoogde gebruik.

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, moet u dit melden aan de fabrikant en uw nationale instantie.

Na gebruik kan dit product een potentieel biologisch risico zijn. Hanteren en weggooien in overeenstemming met geaccepteerde medische praktijk en toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

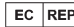 Medisch hulpmiddel  Importeur  Geautoriseerd in de Europese Unie

Order No. G3915



Voor meer informatie over het complete **ConvaTec product assortiment** neemt u contact op met:

Geproduceerd door:

ConvaTec Inc.

Greensboro, NC 27409

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK


Nederland
0800-0224444 - stomazorgproducten
0800-0224460 - wondzorgproducten

© 2021 ConvaTec Inc.
®/™ Een handelsmerk van ConvaTec Inc.