

VARIHESIVE

INSTRUCTIONS FOR USE



VARIHESIVE is prepared from non-irritating ingredients, (gelatin, pectin, carboxymethylcellulose and polyisobutylene), providing protection to the skin.

VARIHESIVE is a protective wafer for use in the management of ileostomies, colostomies, ileal conduits and fistulae management.

VARIHESIVE protects skin while healing takes place and provides a surface to which appliances may be attached.

VARIHESIVE has a double sided adhesive quality.

VARIHESIVE will protect skin sensitive to plaster adhesives.

VARIHESIVE will mould to the skin surface which may be irregular due to skin folds, scar tissue, etc.


Instructions for applying Varihesive



For maximum protection it is important that Varihesive fits closely to the stoma. Using small scissors and a cutting guide, cut a centre hole to fit the stoma accurately.



Remove the backing paper from the Varihesive.

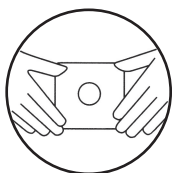

Place the Varihesive over the stoma and smooth down.

Hints for routine skin care when using Varihesive

1. Clean skin thoroughly and pat dry
2. Varihesive should be fashioned to fit the stoma as closely as possible so that the skin around the stoma is completely protected.
3. If the area around the stoma is irregular, which may permit leakage, Orabase or Stomahesive paste should be used as a filling before applying the Varihesive square.
4. Small amounts of adhesive residue which may be left behind after removal need not be completely removed prior to re-application.

This device is for single-use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination. Physical properties of the device may no longer be optimal for intended use.

If during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

VARIHESIVE

Gebruiksaanwijzing



VARIHESIVE bestaat uit huidvriendelijke bestanddelen (gelatine, pectine, carboxymethylcellulose en polyisobutyleen) die de huid bescherming bieden.

VARIHESIVE is een beschermende huidplaat voor het gebruik bij stoma's en fistelverzorging.

VARIHESIVE beschermt huid tijdens het herstel en biedt een bescherm laag waarop stoma-opvangsystemen bevestigd kunnen worden.

VARIHESIVE heeft een dubbelzijdige kleeflaag.


VARIHESIVE beschermt gevoelige huid tegen kleefstoffen.

VARIHESIVE Varihesive vormt zich naar het huidoppervlak dat onregelmatig kan zijn als gevolg van plooien, littekenweefsel etc.


Instructie voor het gebruik van Varihesive



Voor maximale bescherming is het belangrijk dat de Varihesive huidplaat precies om de stoma past. Gebruik een kleine schaar en een malletje. Knip een gat in de juiste vorm en maat in het midden van de huidplaat.

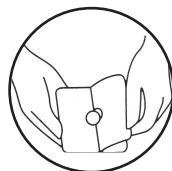

Verwijder het afdekpapier van de Varihesive huidplaat.

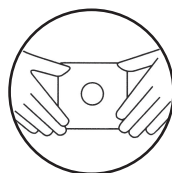

Plaats de Varihesive huidplaat over de stoma en druk het voorzichtig aan.

Tips voor regelmatige huidverzorging bij het gebruik van Varihesive

1. Reinig de huid grondig en dep deze droog.
2. De Varihesive-huidplaat moet zo goed mogelijk passend om de stoma geknipt worden om de huid rond de stoma volledig te beschermen.
3. Als de huid rond de stoma onregelmatig is en er daardoor een vergrote kans is op lekkage kan Orabase of Stomahesive pasta gebruikt worden als opvulling, voordat de Varihesive huidplaat gebruikt wordt. Raadpleeg eerst de bijsluiter van het product.
4. Kleine hoeveelheden van achtergebleven kleefresten hoeven niet helemaal verwijderd te worden voordat de nieuwe huidplaat wordt aangebracht.

Dit hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik en mag niet opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan een verhoogd risico op infectie of kruisbesmetting met zich meebrengen. Mogelijk zijn de fysieke eigenschappen van het hulpmiddel niet meer optimaal voor het beoogde gebruik.

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, moet u dit melden aan de fabrikant en uw nationale instantie.

Disposal

After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local laws and regulations.

We pride ourselves on the quality of our products and the stringent testing they undergo before leaving our factory.

However, should you experience any difficulty with any of our products, please let us know.

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.

Wegwerpen

Na gebruik kan dit product een potentieel biologisch risico zijn. Hanteren en weggoien in overeenstemming met geaccepteerde medische praktijk en toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Onze producten ondergaan een strenge controle voordat ze de fabriek verlaten.

Mocht u desondanks toch problemen ervaren, laat u dat ons dan weten.


© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ zijn geregistreerde handelsmerken van ConvaTec Inc.

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
USA
1-800-422-8811

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

Sponsored in Australia by:
ConvaTec (Australia) Pty Ltd.
1800 339 412 Australia
0800 441 763 New Zealand

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK

輸入販売元
コンバテック ジャパン株式会社
お客様相談窓口
☎ 0120 532384

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa,
Polska

Linus Medical
Duntes street 6-412,
Riga, LV-1013
Latvia

ConvaTec Česká republika s.r.o.
Olivova 4/2096
110 00 Praha 1

Linus Medical
Narva mnt 5,
10117 Tallinn, Estonia

Versium, s.r.o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovak Republic

Replant Cardo Kft.
Nándorfejérvári u. 35,
H-1119 Budapest
Hungary

Импортер / Представитель в РФ:
ЗАО «КонваТек»,
115054, Москва,
Космодамианская наб., д.52, стр.1.
Тел.: +7 (495) 663 70 30
Факс: +7 (495) 748 78 94
Информационная линия поддержки
КонваТек (звонок по России
бесплатный): 800-200-80-99.
Часы работы 9.00-17.00

STOMA MEDICAL d.o.o.
Frana Folnegovića 1c
10000 ZAGREB
Phone: 00385 (0)1 5508 998
Fax: 00385 (0)1 6177 217
E-mail: rbegovic@stoma-medical.hr
Web: www.stoma-medical.hr

PCP EOOD
ул. „Виктор Григорович“ №3 ет.1,
София 1606
Ел. поща: rsr@techno-link.com
тел. (02) 851 90 70, 851 90 71
факс: (02) 951 59 32
Безплатна тел. линия: 0800 18 808

TT Medik
Bulevar Mihajla Pupina 10 D/I
11070 Novi Beograd
Srbija

Rombiomedica S.R.L.
Str. Nikolai Gogol nr.1A,
apart. 2, sector 1,
011815 Bucharest
Romania

Zastopnik in distributor v Sloveniji:
VALENCIA Stoma-Medical d.o.o.
Gregorčičeva 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Brezplačna tel. številka: 080 15 45

Linus Medical UAB
Ukmergės g. 223,
LT-07156 Vilnius
Lithuania

ConvaTec Turkey
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk.
A Blok, No:21A, İç Kapı No: 9,
34396 Sarıyer
İstanbul TURKEY

Australia	1 800 339 412
België	02 3899742 or 0800-12011
Bosna	080020208
Canada	1-800-465-6302
Česká republika	800122111
Chile	800-210-113
Crna Gora	0800 101 102
Danmark	48 167474
Deutschland	0800-78 66 200
Eesti	8003030
Egypt	(2012) 3645495 / (2012) 5557478
España	93 6023700
France	0800 35 84 80
Hong Kong / 香港	852-25169182
Hrvatska	01/5508 999 or 0800 8000
Ireland	1 800 721721
Israel	+ 972 3 9256712
Italia	800 930 930
Kosovo	044/ 116 722
Latvija	8000 5 333
Lietuva	8-800-70001
Luxemburg	+32 2 3899742 or 0800-23157
Magyarország	0680 201 201 (code: 1212)
Malaysia	1-800-880-601
Nederland	0800-0224444 - stomazorgproducten 0800-0224460 - woundzorgproducten
New Zealand	0800-441-763
Norge	80030995
Österreich	0800-216339
Polska	0800 120 093
Portugal	800 20 1678
România	+40 21 230 23 90
Singapore	65-62459838
Slovenia	080 15 45
Slovensko	0 800 122 111
South Africa	+27 (0)861 888 842
Srbija	0800 101 102
Suisse	0800-551110
Suomi	0800 179 797
Sverige	08-704 72 50 / 020-21 22 22
Thailand	66-2-2240060
Türkiye	0216 416 52 00
United Kingdom	0800 282 254 - Ostomy Care 0800 289 738 - Wound Therapeutics
中国	4006065576
台灣 / 台湾	0800-886-989
한국	82-2-34536333
日本	☎ 0120-532384
Россия	+7 800 200 80 99
Україна	+380 44 451 85 51
Македонија	02/ 3 248 426 / 02/ 3 248 458
България	0800 18 808

www.convatec.com

Revised 2022-03
1026736V2